

簡単・迅速に カンピロバクターを 検出できます！

わずか
25分




小型で迅速なモバイル リアルタイムPCR装置 PCR1100に使用可能なカンピロバクター菌の検出キットをご紹介します。

培養法では、培地交換を繰り返し4日～7日かかるカンピロバクター菌の検査が、わずか25分で測定可能です。

食鳥処理場・農場でカンピロバクターの迅速PCR検査が可能となります！

PicoGene® Campylobacter spp.Kit と PicoGene® PCR1100 を組み合わせた活用例

検査法の検査時間を比較

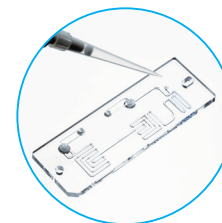

STEP1
測定チップ (別売り) に検体と試薬の混合液を注入



STEP2
測定チップを装置にセット



PicoGene® PCR1100




STEP3
反応条件を選択し Start ボタンを押して測定開始

ピコジーン カンピロバクター

PicoGene® Campylobacter spp. Kit



- 便利** PicoGene® PCR1100との組み合わせで、いつでもどこでもカンピロバクターのPCR検査が可能。
- 迅速** オールインワン試薬なので事前の試薬調製が不要。しかも結果判定まで25分以内。
- 高感度** 盲腸内容物やクロアカスワブなどを使っても、高感度なPCR検査を実現。

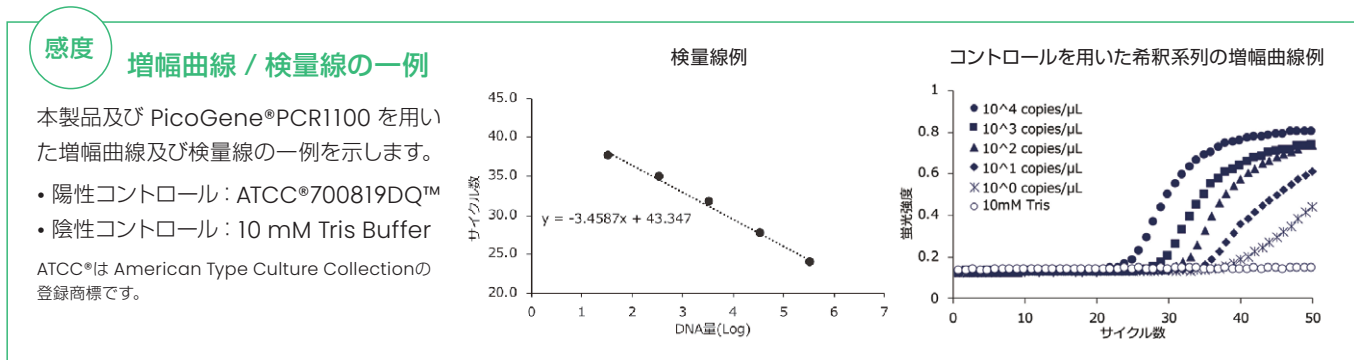

Cat.No.	回数	入数	価格(税抜)
RGT007A モバイル・リアルタイムPCR装置 PicoGene® Campylobacter spp. Kit	16回用	8連PCRチューブ×2セット	¥24,000

ピコジーン

PicoGene® PCR1100

- 特長**
- 「測りたいときに」「測りたい場所で」「迅速に」「簡便に」
 - 加水分解プローブ法で、DNAおよびRNAの検出・測定が可能です。
 - 最短10分で迅速遺伝子検出・測定が可能（測定対象によって測定時間は異なります。）
 - FAM、ROX/HEX、Cy5の同時測定が可能
 - 重量はわずか560 g、ハンディタイプですので屋外での測定にも使用できます。



Cat.No.	価格(税抜)
PCR1100 モバイル・リアルタイムPCR装置 PicoGene® PCR1100	1式 ¥798,000

■ 別売オプション品

Cat.No.	価格(税抜)
MCP2000 モバイル・リアルタイムPCR装置 PicoGene® PCR1100用測定チップ	50枚 ¥38,500

※2023年3月31日をもって、PicoGene® PCR1100に関する事業は日本板硝子株式会社から株式会社ゴフトンに譲渡されました。

製品のご説明やデモンストレーションのご依頼を受け付けております。下記お問い合わせ先または右のQRコードよりご依頼ください。

ご依頼はこちらから →

日本ジェネティクス株式会社
 〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-14 後楽森ビル18階
 TEL 03 (3813) 0961 <https://n-genetics.com>
 FAX 03 (3813) 0962 ✉ info@genetics-n.co.jp

